



Hörsysteme

richtig tragen und pflegen

Eine kleine Hilfe für Hörsystemträger, Angehörige, Pflegekräfte und alle, die mit Hörsystemen im Alltag zu tun haben. Mit Tipps und verständlichen Illustrationen.

Die Informationen gibt es in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Türkisch, Arabisch, Russisch und Chinesisch.

Zum Herunterladen & Ausdrucken auf
www.richtig-gut-hoeren.de

EINSETZEN

Geräte am Ein-Aus-Schalter einschalten. Ist kein solcher Ein-Aus-Schalter am Gerät, bitte Anleitung beachten oder Hörakustiker fragen. Niedrigste Lautstärke einstellen, um Rückkopplung zu vermeiden.



VOR DEM EINSETZEN

Jede neue Batterie hat auf der +Seite einen Aufkleber. Aufkleber entfernen, Batterie zur Seite legen. Batterieklappe des Hörsystems öffnen. Alte Batterie entnehmen. Sollte die Batterieklappe feucht geworden sein, trocknen. Neue Batterie mit +Seite nach oben einsetzen.

ABLEGEN

Hörsystem ausschalten.

Hörsystem wird länger nicht benutzt:
→ Batterie herausnehmen.

Leere Batterien bitte fachgerecht entsorgen.

biha

Bundesinnung der
Hörakustiker KdÖR


HÖRSYSTEME RICHTIG EINSETZEN & HERAUSNEHMEN

HÖRSYSTEM RICHTIG EINSETZEN

HINTER-DEM-OHR-SYSTEM (HdO)

Mit klassischem Ohrpassstück

Hörsystem am Ende des Schlauchs kurz vor dem Ohrpassstück halten. Ohrpassstück in Gehörgang setzen.

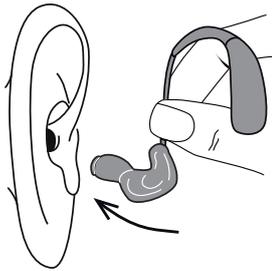


Außenstück hinter das Ohr legen, sodass der Schlauch dicht am Kopf vor der Ohrmuschel liegt.



Das Einsetzen ist leichter, wenn man das Ohr mit der anderen Hand leicht nach oben und hinten zieht.

Richtig eingesetzt, drücken weder das Ohrpassstück noch das Hörsystem und der Schlauch liegt an.

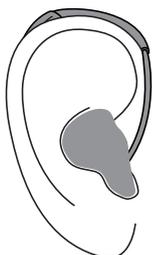


HÖRSYSTEM RICHTIG EINSETZEN

HINTER-DEM-OHR-SYSTEM (HdO)

Mit Schirmchen


Hörsystem am Ende des Schlauchs kurz vor dem Schirmchen halten. Schirmchen in Gehörgang setzen.

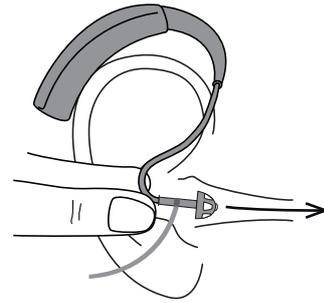

Außenstück hinter das Ohr legen, sodass der Schlauch dicht am Kopf vor der Ohrmuschel liegt.

Das Einsetzen ist leichter, wenn man das Ohr mit der anderen Hand leicht nach oben und hinten zieht.

Die fadenförmige Plastik-Abstützung in den unteren Teil der Ohrmuschel legen, damit das Schirmchen sicher im Ohr sitzt.

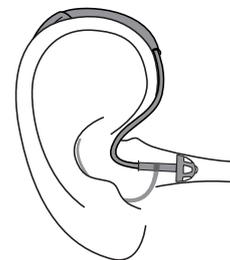

RICHTIG HERAUSNEHMEN

HdO

Zuerst das Außenstück vom Ohr heben. Dann Ohrpassstück bzw. Schirmchen herausziehen.

Die Beschreibung kann abhängig vom Modell leicht abweichen.


HÖRSYSTEME RICHTIG EINSETZEN & HERAUSNEHMEN

HÖRSYSTEM RICHTIG EINSETZEN

IM-OHR-SYSTEM (IdO)

Mit Ohrpasstück oder Schirmchen


Hörsystem mit der schmalen Seite vorsichtig Richtung Gehörgang setzen. Leicht drehen, um es in die richtige Lage zu bringen. Mit dem Zeigefinger sanft in den Gehörgang drücken.

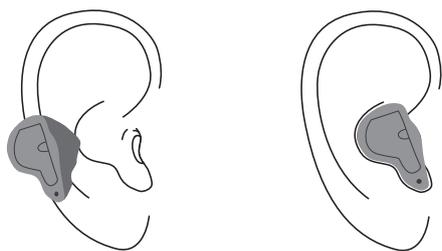

Das Einsetzen ist leichter, wenn man das Ohr mit der anderen Hand leicht nach oben und hinten zieht.

ITC (In-The-Channel) und CIC (Complete-In-The-Channel)

Hörsystem mit der schmalen Seite vorsichtig Richtung Gehörgang setzen. Leicht drehen, um es in die richtige Lage zu bringen. Mit dem Zeigefinger leicht in den Gehörgang drücken. Das CIC ist noch kleiner als das ITC und sitzt tiefer im Gehörgang.

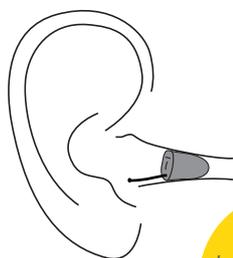

Es darf kein Pfeifton zu hören sein.

RICHTIG HERAUSNEHMEN

IdO

Das Hörsystem an der Kante (IdO) oder am Zugfaden (ITC und CIC) halten und herausziehen. Nicht am Batteriefach herausziehen.

HÖRSYSTEM RICHTIG EINSETZEN


RECEIVER-IN-THE-CHANNEL (RIC)

Mit Ohrpasstück oder Schirmchen

RIC-Systeme werden auch ex-Hörer-Systeme genannt. Bei ihnen sitzt der Lautsprecher/Hörer direkt im Ohr. Ein sehr dünner Schlauch verbindet ihn mit dem Hörsystem.


RIC mit Ohrpasstück

Hörsystem am Ende des Schlauchs kurz vor dem Ohrpasstück halten. Ohrpasstück mit der schmalen Seite vorsichtig in Richtung Gehörgang setzen. Leicht drehen, um es in die richtige Lage zu bringen. Mit dem Zeigefinger leicht in den Gehörgang drücken. Außenstück hinter das Ohr legen, sodass der Schlauch dicht am Kopf vor der Ohrmuschel liegt.

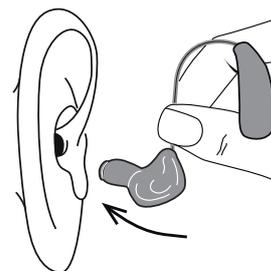

RIC mit Schirmchen

Hörsystem am Ende des Schlauchs kurz vor dem Schirmchen halten. Schirmchen in Gehörgang setzen. Außenstück hinter das Ohr legen, sodass der Schlauch dicht am Kopf vor der Ohrmuschel liegt.

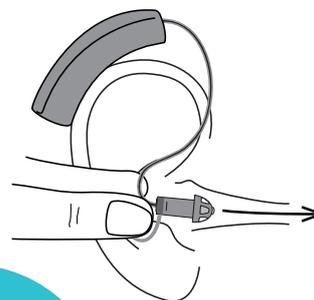

Das Einsetzen ist leichter, wenn man das Ohr mit der anderen Hand leicht nach oben und hinten zieht.

Die fadenförmige Plastikabstützung in den unteren Teil der Ohrmuschel legen, damit das Schirmchen sicher im Ohr sitzt.

Die Beschreibung kann abhängig vom Modell leicht abweichen.

ACHTUNG



VOR SCHMUTZ SCHÜTZEN

Hörsysteme nur mit sauberen, trockenen Fingern anfassen.



VORSICHT MIT SPRAYS ODER CREMES

Erst Pflegeprodukte, von Creme über Parfüm bis Haarspray auftragen, dann Hörsystem einsetzen.



WASSER UND WÄRME SCHADEN

- Hörsysteme vor dem Baden, Duschen oder Waschen entfernen.
- Vor starkem Sonnenlicht schützen.
- Nicht in der Nähe von Heizkörpern, nicht im Badezimmer lagern.



TROCKNEN SCHÜTZT

Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit, auch Schweiß, kann die Elektronik stören. Regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich die Hörsysteme in einer speziellen Trockendose trocknen. Nicht föhnen.

Das richtige Spezialreinigungstuch, Lösungsmittel und Bürste gibt es beim Hörakustiker vor Ort. Ebenso spezielle Pflegeprodukte und auch die Trockendose.

Hörsysteme nur mit Spezialprodukten säubern. Nicht mit Wasser, Alkohol oder Putzmitteln reinigen.

STÖRUNGEN BEHEBEN

KEIN KLANG

Batterie ist leer, verrutscht, rausgefallen:
→ Batterie neu einsetzen.

Batteriefach ist nicht richtig geschlossen:
→ fest verschließen.

LAUTSTÄRKE VERRINGERT SICH

Schwache Batterien:
→ Batterie wechseln.

Passstück, Mikrofon oder Winkel ist mit Ohrenschmalz verstopft:
→ je nach Hörsystem mit einer Bürste reinigen.

In jedem Fall gilt:
→ Der Hörakustiker hilft, auch beim Wechseln von einzelnen Teilen.

HÖRSYSTEM PFEIFT

System ist nicht richtig eingesetzt:
→ erneut einsetzen.

Hörsystem ist im verkehrten Ohr:
→ Markierung für rechts/links überprüfen.

Ohrpassstück oder Schallschlauch ist defekt:
→ Der Hörakustiker hilft.

Gehörgang ist mit Ohrenschmalz verstopft:
→ Der Hörakustiker oder der HNO-Arzt hilft.

HÖRSYSTEM GLEITET AUS DEM OHR

Gehörgang ist mit Ohrenschmalz verstopft:
→ Der Hörakustiker oder der HNO-Arzt hilft.

Hörsystem sitzt zu locker oder verursacht Schmerzen:
→ Der Hörakustiker hilft.

PROBLEME BEIM EINSETZEN

Ein spezielles Gel kann an der Gehörgangsöffnung aufgetragen werden. Der Hörakustiker weiß Rat.

Impressum

Bundesinnung der Hörakustiker (biha) KdöR,
Wallstraße 5, 55122 Mainz,
Internet: www.biha.de, Telefon +49(0)6131/96 560-0